

MISTURADOR DE LABORATÓRIO

MODELO MSM-B E MSM-S-B

DESCRIÇÃO GERAL

Equipamento de laboratório para misturar, homogeneizar, cisalhar ou apenas agitar as fases de desenvolvimento e preparação de soluções, pastas ou emulsões.

Misturador de laboratório de até 3000 rpm com mandril.

Trabalha com diversos tamanhos de hastes e tipos de hélices para o preparo de emulsões e pastas.

Possui motor de 1/2 CV com controle de velocidade através de potenciômetro com display digital.


Disponível também com motor para subir e baixar o cabeçote de forma automática: modelo MSM-S-B.




DADOS TÉCNICOS - MODELO MSM-B E MSM-S-B

Controle de velocidade	150 - 3000 rpm	150 - 3000 rpm
Motor	1/2 CV	1/2 CV
Motor para subir cabeçote	-	1/12 CV
Potência	0,4 kW	0,6 kW
Alimentação elétrica	220 V + T	220 V + T
Dimensões	L 50 x P 30 x A 80 cm	L 50 x P 48 x A 80 cm
Peso	15 kg	22 kg

Misturador com sistema de sobe-desce motorizado - modelo MSM-S-B:

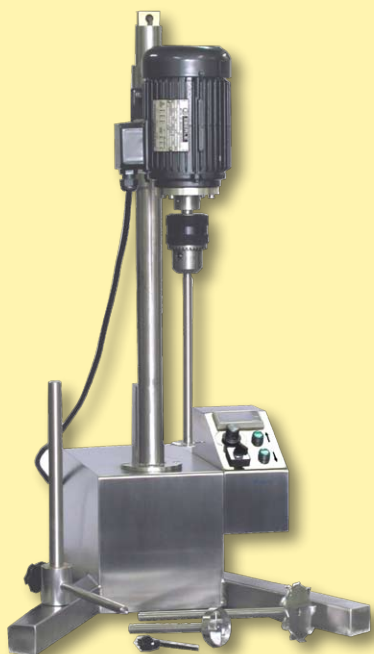

hastes e hélices:

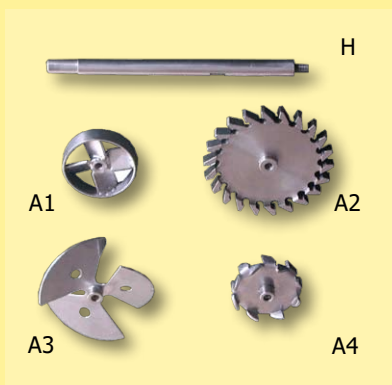

Hastes	comprimento	Ø
H1	150 mm	12,7 mm
H2	200 mm	12,7 mm
H3	250 mm	12,7 mm
H4	300 mm	12,7 mm

Hélices	Ø externo
A1	50 / 70 mm
A2	50 / 65 / 88 mm
A3	50 / 65 / 80 mm
A4	25 / 50 / 60 / 75 mm
especiais	sob consulta

Werner Mathis AG

Rütisbergstrasse 3
CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland
Telefon 41(0)44-852 5050
Telefax 41(0)44-850 6707
E-Mail info@mathisag.com
Homepage www.mathisag.com

Aparelhos de Laboratório Mathis Ltda.

Estrada dos Estudantes, 261
06707-050 Cotia - SP, Brasil
Tel: 55 (0)11 3883-6777
Fax: 55 (0)11 3883-6750
E-mail: mathis@mathis.com.br
Site: www.mathis.com.br